

# 滚筒球磨机

JC-GQM系列

工作效率高 磨细粒度均匀  
一次研磨多个样品



## About

浙江捷宸仪器设备有限公司是一家专业的粉体设备制造商。公司产品涵盖破碎机，球磨机，混料机，筛分机等粉体设备和科学实验用手套箱。

公司实力雄厚，被国家认定为高新技术企业，公司产品自主研发，拥有发明专利多个。多年来服务全球10000多个客户。典型客户：清华大学，北京大学，哈佛大学，中科院，比亚迪，富士康等。

实验球磨机是实验室、小批量生产用超细研磨、混合设备。该机美观新颖，结构紧凑，操作方便，工作效率高，磨细粒度均匀，是科研、教学、试验、生产的优选设备。可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、非金属矿、金属矿，新型材料等行业使用。

公司生产的实验球磨机有：实验行星球磨机、实验滚筒球磨机、罐磨机、实验搅拌机球磨机，系列齐，规格多，型号全。欢迎来电咨询。13266541837

### 产品简介

滚筒球磨机也叫罐磨球磨机、滚坛机，是实验室、小批量生产用超细研磨、混合设备。该机美观新颖，结构紧凑，操作方便，工作效率高，磨细粒度均匀，是科研、教学、试验、生产的优选设备。可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、金属粉末、非金属矿、新型材料等行业使用。该机外观新颖，结构先进，使用方便。该机罐体转速优化设计，罐体由橡胶辊子托动做转动，可使研磨罐体内的介质球形成倾流式运动分散物料，获得合适的研磨效果。罐磨机(滚坛机)机采用了数显时间控制器控制，根据需要可以随时设定工作时间，并具有暂停、累加定时控制功能，操作省时省力，轻松方便。



电子材料



生物制药



磁性材料



金属矿

### 产品工作原理

滚筒球磨机在工作时，筒体内的研磨介质和物料一起随筒体转动提升至一定高度，由于重力作用而脱离筒壁沿抛物线下落，物料在研磨介质的冲击作用和研磨介质的滚动和滑动产生的摩擦和剪切作用下被粉碎。

### 产品特性

- 可以多个样品同时研磨；
- 可以间歇或连续操作；
- 能根据要求进行定时；
- 适用于物料细磨，粉碎效率高；
- 罐体承重胶辊由特殊材料制成，经久耐用。

### 两工位罐磨机参数


名称	JC-GQM-2-5	JC-GQM-2-15	JC-GQM-2-20
外形尺寸/重量	950×480×685/59kg	1130×550×690/80kg	1350×650×690/92kg
电机规格	YE2-80M2-4B3	YE2-90S-4B3	YE2-90L-4B3
变频器规格	0.75kw/220V	1.1kw/220V	1.5kw/220V
主辊转速	50-410rpm±10	40-365rpm±10	40-340rpm±10
手摇装置	选购	选购	选购
防护罩	选购	选购	选购

### 四工位罐磨机参数

名称	JC-GQM-4-5	JC-GQM-4-5(双层)	JC-GQM-4-15	JC-GQM-4-20
外形尺寸/重量	950×660×690/70kg	950×480×870/92kg	1130×800×690/95kg	1350×820×690/122kg
电机规格	YE2-80M2-4B3	YE2-80M2-4B3	YE2-90L-4B3	YE2-100L1-4B3
变频器规格	0.75kw/220V	0.75kw/220V	1.5kw/220V	2.2kw/380V
主辊转速	50-410±10(rpm)	50-410±10(rpm)	40-365±10(rpm)	40-340±10(rpm)
手摇装置	选购	选购	选购	选购
防护罩	选购	选购	选购	选购

### 八工位罐磨机参数

名称	JC-GQM-8-5	JC-GQM-8-15
外形尺寸/重量	950×660×960/106kg	1130×800×960/152kg
电机规格	YE2-90L-4B3	YE2-100L1-4B3
变频器规格	1.5kw/220V	2.2kw/380V
主辊转速	50-410±10(rpm)	40-365±10(rpm)
手摇装置	选购	选购
防护罩	选购	选购

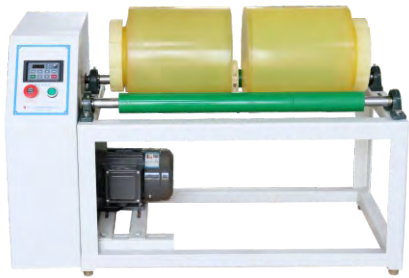

## 二工位罐磨机

可以2个样品同时研磨；适用于物料细磨，粉碎效率高。



## 四工位罐磨机

可以4个样品同时研磨；适用于物料细磨，粉碎效率高。



## 八工位罐磨机

可以8个样品同时研磨；适用于物料细磨，粉碎效率高。



## 定制罐磨机

可根据客户需求定制罐磨机。